


Unser Maßstab ist der Mensch. Von Anfang an!
Geeichte Komfort-Babywaagen



M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet

ADE

Geeichter Wiegekomfort für Frühchen, Babys und Kleinkinder – auch mit Längenmesssystem.

Wir hören und sehen sehr genau hin, wenn es um die Bedürfnisse der kleinsten Patienten und der Anwender unserer Waagen geht. So können wir die Praxiserfahrungen von Ärzten und Pflegepersonal, aber auch von Eltern an unsere Produktdesigner und wiegetechnischen Ingenieure weitergeben.

Das Ergebnis verbindet durchdachte Funktionen mit einer stabilen, sicheren und kindgerechten Bauweise: Präzise, zuverlässige und anwenderfreundliche Säuglings- und Kleinkindwaagen für den Einsatz in Praxen und Entbindungsstationen, Kinderkliniken und Intensivstationen.



M118000



M118000 /-01



Die Waage im Video: Bitte hier klicken!

Im Fokus: **In der Praxis erprobt**

**ZERO
TARA**

AUTOMATISCHE NULLSTELLUNG

Ohne weiteres Zutun vom Anwender findet die Waage bei jedem Anschalten selbstständig den Nullpunkt und ist sofort bereit zum Wiegen.

TARA

Praktisch um zusätzliche Gewichte und Gegenstände wie eine Windel oder ein Deckchen automatisch vom Wiegeergebnis abzuziehen.

HOLD

NACHWIEGE-FUNKTION

Zweit- oder Kontrollwiegungen auf Knopfdruck, ohne das Kind von der Waage heben zu müssen.

AUTO-HOLD-FUNKTION

Die Anzeige des Gewichts wird gehalten, während sich der Behandler um das Kind kümmern und anschließend in Ruhe den Wert notieren kann.



BATTERIESTANDSANZEIGE

Die Anzeige des Ladestandes sorgt für rechtzeitigen Batteriewechsel und so für verlässliches Wiegen.

**ON
OFF**

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Mit ihrer Abschaltautomatik spart die Waage Energie für unnötige Standzeiten ganz von selbst.

M118000 / -01

Der Gesundheit verpflichtet

ADE



Durchdachte Funktionen



ZWEIBEREICHSWAAGE

Bis 20 kg Höchstlast ermitteln diese Modelle präzise Gewichtsangaben – bis 10 kg mit einer extrem feinen Teilung von 5 g, über 10 kg mit einer Teilung von 10 g.



SPARSAM & MOBIL

Die Waagen bieten ihren vollen Funktionsumfang nicht nur im Netzbetrieb, sondern auch im mobilen Batteriebetrieb. Ihre 4 Batterien (AA) versorgen die Waage für 4.000 Wägungen inkl. Ein- und Ausschalten mit Strom.



BENUTZEREINSTELLUNGEN


Umfangreiche Auswahl von individuellen Starteinstellungen wie Abschaltzeiten, Ein- oder Ausschalten von Funktionen (z. B. Auto-Hold).

Die technischen Details

- Höchstlast 20 kg
- Teilung 5 g < 10 kg > 10 g
- Beleuchtetes Display
- Automatische Nullstellung
- Tara-Funktion
- Hold- und Auto-Hold-Funktion
- Batteriestandanzeige
- Automatische Abschaltung
- Batteriebetrieb (4 x AA Batterien inkl.)
- Netzbetrieb (230V) optional
- User-Serviceprogramm
- Internes Justage-Programm zur schnellen Nacheichung

Modell M118000-01


- Integrierte Längenmessung

M118000 / -01 



Das Display

- Hinterleuchtetes LCD-Display zum Ablesen in abgedunkelter Umgebung
- Große kontraststarke Anzeige
- Robuste Folientastatur, Schutzart IP20
- Intuitive Bedienung über Soft-Touch-Tasten

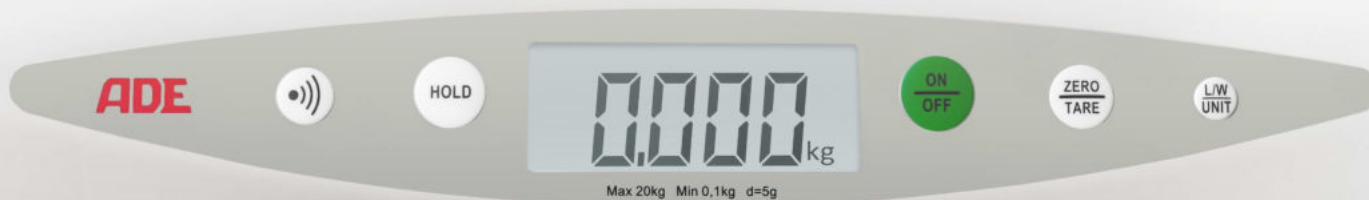

M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

ADE M118000



GROSSZÜGIGE WIEGEFLÄCHE
mit sanft geformter Mulde für
ein geborgenes Gefühl




GERUNDETER KORPUS
ohne spitze Ecken oder
scharfe Kanten



LEICHTES EIGENGEWICHT
von 3,2 kg

ADE M118000 

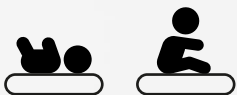

WIEGEN VON BABYS
ODER KLEINKINDERN
im Liegen oder Sitzen

STÖRUNGSFREIES WIEGEN
auch beim Festhalten am
Rand der Wiegemulde

SPALTFREIE WIEGEFLÄCHE
für eine leichte Reinigung

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

ADE M118000-01 

mit integrierter Längenmessfunktion

FREIE POSITION
DES KINDES
auf der Wiegefläche



ZWEI MESSARME
für eine simultane
Größenanzeige

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

ADE M118000-01 

AUTARKE AUSRICHTUNG
beider Messarme



EINFACHES UMSCHALTEN
zwischen Wiegeergebnis
und Größenanzeige



Messbereich von 400 bis 800 mm Länge

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

Kleine Menschen. Große Aufgaben.

Ihre Bedürfnisse und Sicherheit stehen bei der Behandlung und Pflege von Säuglingen im Vordergrund. Damit sich Babys in ungewohnten Situationen, wie zum Beispiel beim Wiegen und Messen, entspannen können, braucht es eine vertrauensvolle Umgebung.

Darum legen wir bei unseren Waagen Wert auf hochwertige Materialien, eine angenehme Formgebung, Stabilität und ein ebenso schnelles wie einfaches Handling.



M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**

Unser Qualitätsversprechen

Wir bieten unseren Kunden Qualität auf höchstem Niveau. Darum betreibt die ADE Germany GmbH ein integriertes Qualitätsmanagementsystem, welches gemäß olgender Normen durch die TÜV NORD CERT GmbH zertifiziert wurde:

- DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- DIN EN ISO 13485 Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte



Innerhalb der EU müssen Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt und zur Bestimmung der Masse in Ausübung der Heilkunde den Richtlinien 93/42/EWG über Medizinprodukte und 2014/31/EU betreffend der Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt entsprechen.



Beratung und Kontakt

+ 49 40 432 776-0
medical@ade-germany.de

ADE Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 15
D-22143 Hamburg – Germany
ade-germany.de

M118000 / -01 

Der Gesundheit verpflichtet **ADE**