

Hochwertige  
Produkt-Technologie  
für Bad & WC.



## Intelligente Hygiene – Made in Germany.

---

Die tägliche Körperhygiene trägt entscheidend zum Erhalt der persönlichen Gesundheit bei. Mit intelligenten, innovativen und bedarfsgerecht anpassbaren Hilfsmitteln für Bad & WC leistet DIETZ einen wertvollen Beitrag für eine bestmöglich selbstbestimmte und eigenständige Körperhygiene für Menschen mit körperlicher Einschränkungen.

Unter den beiden Marken »DIETZ SmartCare« im Premiumsegment und »TOMTAR« ist die Bad & WC Produktpalette darauf ausgerichtet, den ganz individuellen Ansprüchen der Kundinnen und Kunden in vollem Umfang zu genügen und gleichzeitig den Anforderungen von Pflege und Reha in der täglichen Versorgung gerecht zu werden. Entscheidende Faktoren sind dabei Funktionalität, Ergonomie und eine optimale Bedienbarkeit.

Der Einsatz innovativer Materialien, wie die **antimikrobielle Produkt-Technologie »B-protect«** mit Polygiene BioMaster™, gestalten den täglichen Schutz der Gesundheit für Sie noch einfacher und sicherer. Die hohe Wirksamkeit wurde in mehr als 2.000 Anwendungen erfolgreich durch unabhängige Institute nach ISO 22196 und ISO 21702 getestet. Das Resultat ist ein deutliches **Plus an Hygienesicherheit**.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.





Meine Formel für  
die optimale Hygiene.



#### Wirksam gegen MRSA und SARS-CoV-2.

»Polygiene BioMaster™«-Additive verringern deutlich die Belastung der Produktoberfläche mit MRSA oder SARS-CoV-2.



#### Hohe Effizienz.

Nach 24 Stunden Reduktion von > 99 % der Krankheitserreger.



#### Hygienische Langzeit-Wirkung.

Die »Polygiene BioMaster™«-Technologie bleibt über die gesamte Nutzungsdauer eines Produkts wirksam.



#### Achten Sie beim Kauf auf dieses Siegel.

Es garantiert Ihnen durch den Einsatz der neuen Produkt-Technologie »B-protect« mit Polygiene BioMaster™ das Plus an Hygienesicherheit.



**POLYGIENE**  
PRODUCT PROTECTION

#### Das Plus an Hygienesicherheit: Die Produkt-Technologie mit Polygiene BioMaster™.

Sich gepflegt zu fühlen bedeutet, sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Mehr noch: Eine regelmäßige Körperhygiene trägt entscheidend dazu bei, die eigene Gesundheit zu schützen. Und wenn Nutzer mit körperlich Einschränkungen noch auf spezielle Hilfsmittel im Bad angewiesen sind, dann sind maximal mögliche Schutzmechanismen gefragt.

Um die Verbreitung von Bakterien zu verringern und das Risiko von Kreuzkontaminationen zu minimieren, müssen Oberflächen leicht zu reinigen und hygienisch sein.

Genau für diese Funktion wird dem Material der ausgewählten Bad & WC-Hilfen von DIETZ SmartCare »Polygiene BioMaster™« beigefügt. Und da dies bereits im Herstellungsprozess geschieht, funktioniert dieser Schutz vor Bakterienwachstum dauerhaft über die gesamte Nutzungsdauer.

Die hohe Wirksamkeit wurde in mehr als 2.000 Anwendungen erfolgreich durch unabhängige Institute nach **ISO 22196** und **ISO 21702** getestet.

# KANJO B-protect

Badewannenlifter antimikrobiell

- Handsteuerung »Power«  
Lithium-Ionen mit 4 Zellen
- Handschalter mit  
Schnellladetechnologie  
(1 h Ladezeit)



KANJO B-protect inkl.  
Bezügen (antibakteriell)  
in Aquamarin

## KANJO B-protect

Sitzfläche T x B x H (mm)	500 x 375/710 (m. Seitenklappen) x 65-455
Rückenlehne B x H (mm)	350 x 680
Standfläche B x T (mm)	220 x 530
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>140</b>
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,9

Der »KANJO B-protect« bietet die perfekte Hygiene beim Baden. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort. Die neue Produkt-Technologie mit Polygiene BioMaster™ bietet zusätzlich das **Plus an Hygienesicherheit.**

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte
- Handsteuerung »POWER«

### Modell mit Handsteuerung »Power«

- **Enorme Kapazität:** Bei der maximalen Belastung von 140 kg ermöglicht der Akku mit einer Ladung bis zu sieben Nutzungsintervalle



# KANJO Power / Eco

## KANJO XL

### Badewannenlifter

Der »KANJO« in den beiden Leistungsklassen »Eco« und »Power« schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort. Die dazu wählbaren Bezüge aus reißfestem Material in Blau bieten ein zusätzliches Plus an Komfort.

- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte
- Belastbar bis 140 kg

### KANJO XL

- Erhöhte Belastbarkeit bis 170 kg

	KANJO Power /Eco	KANJO XL
HMV-Nr.	04.40.01.0060	04.40.01.0065
Sitzbreite (mm)	375/710 (mit Seitenklappen)	375/710 (mit Seitenklappen)
Sitztiefe(mm)	500	500
Sitzhöhe (mm)	65-455	65-455
Rückenlehne B x H (mm)	350 x 680	350 x 680
Standfläche B x T (mm)	220 x 530	220 x 530
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>140</b>	<b>170</b>
Gewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,8	11,5



KANJO Power/Eco  
mit Bezügen in Blau



KANJO Power/Eco  
ohne Bezüge



KANJO XL  
mit vollflächigen  
Bezügen in Blau



# KANJO Power / Eco KANJO XL

## Badewannenlifter

### Handsteuerung für alle Modelle.

Mit Öse zum leichten Einhängen in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der rechten oder linken Seite der Rückenlehne.

### Wahlweise mit der Handsteuerung

- »Power« mit 4-Zellen-Lithium-Ionen
- »Eco« mit 3-Zellen-Lithium-Ionen



## Ausführungen

### Badewannenlifter

**KANJO B-protect** inkl. Bezügen in Aquamarin

**KANJO Power** ohne Bezüge

**KANJO Power** Standardbezüge in Blau

**KANJO Eco** ohne Bezüge

**KANJO Eco** Standardbezüge in Blau

**KANJO XL** Vollflächige Bezüge in Blau

# Drehhilfe Dreh- und Übersetzhilfe


## für Badewannenlifter

Der Drehteller wird einfach auf den Sitz des Badewannenlifters gelegt. Man nimmt von außerhalb der Badewanne die Sitzposition ein, hebt die Beine an und senkt sie nach einer Drehung bequem in die Wanne und wieder zurück.

Bei der Dreh- und Übersetzhilfe gleitet der Drehteller auf einer flexiblen Transferschiene zwischen Badewannenrand und Badenwan-nenlifter, was das Einsteigen in die Wanne nochmals einfacher und sicherer macht.



Drehhilfe, blau

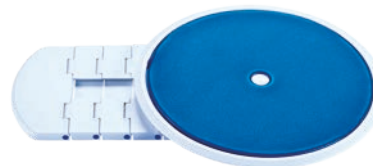

Dreh-/Übersetzhilfe, blau

	Drehhilfe	Dreh-/Übersetzhilfe
HMV-Nr.	22.29.01.0023	22.29.01.0022
Farbe	weiß/Bezug blau	weiß/Bezug blau
Gesamtmaße L x B x H (mm)	320 x 320 x 22	411 x 320 x 22
Sitzfläche (Ø in mm)	320	320
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
Gewicht (kg)	1,1	1,3

# TAYO B-protect

Duschstuhl



Stuhl mit Armlehnen  
und Sitzpad (optional)

Die neue Produkt-Technologie »B-protect« mit Polygiene BioMaster™ bietet zusätzlich das **Plus an Hygienesicherheit.**

TAYO B-protect	
Farbe	Lichtgrau / Stuhlbeine Schwarz
Sitzbreite (mm)	420
Sitzhöhe (mm)	440-590
Gesamtmaße (B* x L) (mm)	530-545 x 500-520
<b>Max. Belastbarkeit</b>	<b>130</b>
Gewicht (kg)	4,58

\* Min. bis max. Auszug der Beine \*\*ohne Armlehnen

# TAYO

Duschhocker/-stuhl Serie



Stuhl mit Armlehnen



Hocker mit Armlehnen



Hocker

Die neue Duschhocker/-stuhl-Serie »TAYO« überzeugt in einem modularen Design mit sinnvoll gestalteten Komponenten. Das einfache Stecksystem erlaubt alle Varianten, ob mit oder ohne Armlehnen, als Stuhl oder als einfacher Hocker. Der Hygieneausschnitt lässt sich durch ein Umstecken der Rückenlehne nach vorne oder hinten ausrichten. Alle Modelle können optional mit einem abnehmbaren Sitzpad und Abdeckkappen für die nicht verwendeten Rückenlehnen-Aussparungen im Sitz ausgestattet werden.



### Sitzpad (optional)

Hautfreundliches Sitzpolster mit mittiger Aussparung, über die das Wasser leicht abfließen kann. Einfach zu befestigen und wieder zu entfernen.



### Abdeckkappen, 2er-Set (optional)

Zur formschlüssigen Abdeckung nicht benötigter Aussparungen in der Sitzfläche.

## TAYO

HMV-Nr.	04.40.03.1028	04.40.03.2045	
Modell	Hocker	Hocker/Armlehnen	Stuhl/Armlehnen
Farbe	Weiß / Stuhlbeine Silber matt		
Sitzbreite (mm)	420/500**		
Sitzhöhe (mm)	440-590		
Gesamtmaße (B* x L) (mm)	530-545 x 500-520		
<b>Max. Belastbarkeit</b>	<b>130</b>		
Gewicht (kg)	3,3	3,92	4,58

## TAYO B-protect & TAYO

### Duschhocker dreieckig

Abgestimmt auf ergonomische Anforderungen vermittelt der »TAYO« Duschhocker mit Sattelsitz höchsten Komfort bei kompakten Maß. Der sowohl vorne und hinten einsetzbare Hygieneausschnitt erleichtert die tägliche Körperpflege.



Die neue Produkt-Technologie »B-protect« mit Polygiene Bio-Master™ bietet zusätzlich das **Plus an Hygienesicherheit.**

	TAYO B-protect	TAYO
Modell	dreieckig	dreieckig
Sitzbreite (mm)	380	
Sitztiefe (mm)	340	
Sitzhöhe (in mm)	440-590	
Standfläche * B x T (mm)	430-450 x 395-410	
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>130</b>	
Gewicht (kg)	2,1	2,1

\*Min. bis max. Auszug der Beine

## TAYO B-protect & TAYO

### Duschhocker rund

Kompaktes Maß, hochsicherer Stand: Der »TAYO« Duschhocker rund ist eine zuverlässige, stabile Unterstützung bei der täglichen Körperhygiene. Wahlweise mit Drehteller inklusive Softpad für noch mehr Komfort.



TAYO B-protect rund



TAYO B-protect rund inkl. Drehteller und Pad



TAYO rund



TAYO rund inkl. Drehteller und Pad

	TAYO B-protect		TAYO	
Modell	rund	rund mit Dreht.	rund	rund mit Dreht.
Sitzhöhe (mm)	435-585	445-595	435-585	445-595
Sitzfläche (Ø in mm)	320			
Standfläche* (Ø in mm)	480 - 540 x 430 - 480			
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>130</b>			
Gewicht (kg)	2,1	2,7	2,1	2,7



# TOMTAR DS / DH

Duschstuhl/-hocker



Bequem und sicher: In zwei Varianten garantieren der höhenverstellbare Duschstuhl und Duschhocker höchsten Komfort. Dabei sind sie nicht nur sehr ökonomisch, sondern auch effizient und platzsparend.

- Sicherer Stand, hohe Stabilität
- Rutschfeste GummifüÙe
- Glatte Oberfläche für leichte Reinigung
- 6-fach höhenverstellbar
- Belastbar bis 100 kg



**TOMTAR DH**  
Duschhocker, höhenverstellbar



**TOMTAR DS**  
Duschstuhl, höhenverstellbar

## TOMTAR DH

## TOMTAR DS

Sitzfläche T x B x H (mm)	295 x 380-490 x 355-505	295 x 380-490 x 355-505
MaÙe L x B x H (mm)	400 x 490 x 385-535	475 x 490 x 680-830
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>100</b>	
Gewicht (kg)	2,0	2,8

**TOMTAR**

# Comfort

Duschhocker



Starke Sicherheit: Mit seiner gepolsterten Sitzfläche bietet Ihnen der Duschhocker Schutz und Komfort auf höchstem Niveau.

- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Einfaches Handling durch geringes Eigengewicht
- Komfortable Polsterung
- Rutschfeste GummifüÙe
- 5-fach höhenverstellbar
- Belastbar bis 160 kg



**Comfort Duschhocker**

## Comfort Duschhocker

HMV-Nr.	04.40.03.1010
Sitz T x B x H (mm)	405 x 435 x 460-560
MaÙe L x B x H (mm)	510 - 540 x 558 - 620 x 640 - 740
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>160</b>
Gewicht (kg)	3,6



## SmartFix

### Toilettensitzerhöhung

#### Komfortable Hygiene. Minutenschnell montiert.

Im Handumdrehen ergonomisch und hygienisch von oben fest an der Keramik montiert!

#### Individuell anpassbare Sitzsicherheit.

Die Toilettensitzerhöhung » **SmartFix** « kann in der Höhe um 80, 120 oder 150 Millimeter angepasst werden. Die seitlich befestigten Armlehnen dienen der Sicherheit und dem Komfort. Sie können bei Bedarf nach oben abgeklappt werden und erleichtern so den Transfer der Nutzer.

	SmartFix B-protect	SmartFix	SmartFix
	mit Armlehnen	mit Armlehnen	ohne Armlehnen
Modell			
Sitzhöhe (mm)	80/120/150		
Armlehnenhöhe (mm)	200		-
Öffnung L x B (mm)	255 x 195		
Maße L x B x H (mm)	497 x 560 x 377	497 x 560 x 377	497 x 445 x 177
Gewicht (kg)	4,1		2,82
Max. Belastb. pro Arml. (kg)	60		-
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>		



SmartFix B-protect mit Armlehnen

Die neue Produkt-Technologie »**B-protect**« mit Polygiene BioMaster™ bietet zusätzlich das **Plus an Hygienesicherheit**.



SmartFix mit Armlehnen

SmartFix ohne Armlehnen

- Erhöhung um 80, 120 oder 150 mm
- Schnellmontage von oben auf die Keramik
- Für alle üblichen WC-Becken
- Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten
- Belastbar bis 120 kg
- Bei geschlossenem Deckel als bequeme Sitzgelegenheit nutzbar

## Relaxon B-protect

Toilettensitzerhöhung antimikrobiell



Flexible Sicherheit: Die »Relaxon« Toilettensitzerhöhung bietet höchsten Sitzkomfort bei einer sehr einfachen Montage. So müssen Sie auch auf Ihren Reisen nicht auf die gewohnte Sicherheit bei der Alltagshygiene verzichten. Die neue Produkt-Technologie mit Polygiene BioMaster™ bietet zusätzlich das **Plus an Hygienesicherheit**.

- Anatomisch geformter Sitz
- Für alle üblichen WC-Becken
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Belastbar bis 200 kg
- Erhöhung um 100 mm

### Relaxon B-protect

Sitzhöhe (mm)	100
Öffnung L x B (mm)	277 x 205
Maße L x B x H (mm)	400 x 370 x 100
Gewicht (kg)	1,4
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>200</b>

## Relaxon

Toilettensitzerhöhung



- Aufsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Anatomisch geformter Sitz
- Für alle üblichen WC-Becken
- Großer Hygieneausschnitt vorn und hinten
- Schnellmontage ohne Werkzeug, reisefähig
- Belastbar bis 200 kg
- Erhöhung um 100 mm
- Mit oder ohne Deckel erhältlich

### Relaxon

	33.40.01.0069	33.40.01.0070
HMV-Nr.	33.40.01.0069	33.40.01.0070
Modell	ohne Deckel	mit Deckel
Sitzhöhe (mm)	100	
Öffnung L x B (mm)	277 x 205	
Maße L x B x H (mm)	400 x 370 x 100	
Gewicht (kg)	1,0	1,4
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>200</b>	

## Bano

Badewannendrehsitz



Der flexible Badewannendrehsitz bietet erhöhte Bewegungsfreiheit und kann durch seine Verstellmöglichkeit auch in übergroßen Badewannen eingesetzt werden.

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Verstellbare Breite: 740–800 mm
- In 90° Schritten drehbar
- Belastbar bis 120 kg



### Bano

HMV-Nr.	04.40.02.3010
Sitz B x T (mm)	400 x 400
Gesamtmaß L x B x H (mm)	570 x 710–870 x 575
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>
Gewicht (kg)	6,5

**TOMTAR**

## 9403-A / 9403-B

Badewannensitz



**9403-B**  
Mit Rückenlehne



**9403-A**  
Ohne Rückenlehne

Ganz nach Ihrem Format: Ergonomische Badewannensitze mit Hygiene-ausschnitt zur Verringerung der Wannensitztiefe bieten Ihnen bequemes und sicheres Badevergnügen.

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Große, ergonomisch gepolsterte Sitzfläche
- Intimausschnitt aus hochwertigem Kunststoff
- Belastbar bis 120 kg

### 9403-A

### 9403-B

HMV-Nr.	04.40.02.1006	04.40.02.2007
Sitz T x B (mm)	400 x 400	400 x 400
Einstellbreite (mm)	475–635	475–635
Gesamtmaß L x B x H (mm)	420 x 735–890 x 285	560 x 735–890 x 430
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>	
Gewicht (kg)	2,7	3,6

## 9400er-Serie



Duschstuhl, -hocker und -klappsitz

Ob als Duschstuhl, Duschhocker oder Duschklapsitz – die verschiedenen Ausführungen mit hoher Funktionalität werden den vielseitigen Anforderungen der Pflege mehr als gerecht.

- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Füße mit Gummikappen, 4-fach verstellbar
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Problemlose Reinigung
- Belastbar bis 120 kg



9400-A  
Duschstuhl mit  
Armlehnen, faltbar



9401-A



9401-A  
Duschstuhl mit  
Armlehnen



9402-A  
Duschhocker mit  
Armlehnen



9404-A  
Duschklapsitz zur  
Wandmontage, faltbar

9400-A

	9400-A	9401-A
HMV-Nr.	04.40.03.2009	04.40.03.2010
Sitz T x B x H (mm)	400 x 400 x 460-530	400 x 400 x 460-530
Maße L x B x H (mm)	530 x 525 x 880-950	530 x 525 x 860-930
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>	
Gewicht (kg)	4,1	3,9

9402-A

9404-A

	9402-A	9404-A
HMV-Nr.	04.40.03.1007	04.40.03.0016
Sitz T x B x H (mm)	400 x 400 x 460-530	400 x 400 x 470-570
Maße L x B x H (mm)	530 x 525 x 640 - 710	490 x 470 x 540 - 640
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>	
Gewicht (kg)	2,75	2,9

# Levina 320-2 / 400-2

## Duschoilettenstuhl



Für die gepflegte Hygiene: Die stabilen, leichten und komfortablen Duschoilettenstühle bieten Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

### Levina – auf einen Blick

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Vier 5"-Schwenkrollen (zwei Feststeller)
- Maximale Überfahrhöhe 435 mm
- Option: Höhenadapter 50 mm
- Einsatz für geschlossene Sitzfläche
- Abschwenkbare und abnehmbare Beinstützen
- Armlehne und Sitzfläche gepolstert
- Ergonomisch geformte Rückenlehne
- Belastbar bis 120 kg
- Levina 400-2: zusätzlich mit Antriebsrädern und Lenkrollen

### Sonderzubehör

- Eimer aus hochwertigem Kunststoff



Levina 320-2



Levina 400-2

### Levina 320-2

HMV-Nr.	18.46.01.2018
Sitz T x B x H (mm)	425 x 435 x 530
Armlehenhöhe (mm)	225 - 235
Maße L x B x H (mm)	885 - 925 x 555 x 930
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>
Gewicht (kg)	11,5

### Levina 400-2

HMV-Nr.	18.46.01.0022
Sitz T x B x H (mm)	425 x 435 x 530
Seitenteilhöhe (mm)	225 - 235
Maße L x B x H (mm)	1015 - 1055 x 635 x 945
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>
Gewicht (kg)	17



## TSU-2 / TSU-4

### Toilettenstuhl universal

Der bewährte Toilettenstuhl garantiert Komfort und Schutz im Hygienebereich. Klappbare Armlehnen unterstützen die leichte Versorgung in der häuslichen und stationären Pflege.

Der »TSU-4« besitzt Feststellbremsen an allen vier Rädern, wohingegen der »TSU-2« ausschließlich über Feststellbremsen an den beiden Hinterrädern verfügt.

- Stabiler Rahmen
- Vier Schwenkrollen
- Überfahrhöhe 420 mm
- Sitzbrille mit integrierter Eimerhalterung
- Inklusive Eimer und Sitzpolster
- Belastbar bis 120 kg



TSU-2, mit Feststellbremsen an den beiden Hinterrädern

#### TSU-2 TSU-4

HMV-Nr.	18.46.02.0064	
Sitz T x B x H (mm)	440 x 470 x 510	
Armlehnenhöhe (mm)	270	
Maße L x B x H (mm)	815 - 825 x 560 x 980	
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>120</b>	
Gewicht (kg)	12,9	13,1

## Santilo

### Badewannenbrett mit Haltegriff

Das anatomisch geformte Badewannenbrett schützt vor den Gefahren beim Ein- und Aussteigen und bietet eine zusätzliche Ablagefläche.

- Rutschhemmende Auflagen an der Unterseite
- Erhältlich in zwei Ausführungen: Länge 690 und 740 mm
- Belastbar bis 150 kg



#### Santilo

HMV-Nr.	04.40.02.0020	04.40.02.0021
Einstellmaß (mm)	300-530	380-650
Sitzfläche B x T (mm)	510 x 240	590 x 240
Gesamtmaß L x B x H (mm)	690 x 350 x 160	740 x 350 x 160
<b>Max. Belastbarkeit (kg)</b>	<b>150</b>	
Gewicht (kg)	2,2	2,7



Druckfehler, Irrtümer und Preis-  
oder Produktänderungen vorbehalten.  
© DIETZ GmbH, Karlsbad

Nachdruck, auch auszugsweise,  
nur mit schriftlicher Genehmigung  
von DIETZ GmbH, Karlsbad.

Stand 07/2023. V14



Adaptiv-Rollstühle / Manuelle Rollstühle

DIETZ Power Elektro-Rollstühle

Rollatoren

Gehhilfen

Bad & WC

XL- und XXL-Produkte / Sonderanfertigungen

DIETZ GmbH  
Reutäckerstraße 12  
76307 Karlsbad  
[www.dietz-group.de](http://www.dietz-group.de)

---

Ihr Sanitäts-Fachhaus

---