

SÄULENLIEGEN FÜR UNTERSUCHUNG, BEHANDLUNG UND THERAPIE

SERIE **6000E**

2022.1



MIT 2-TEILIGER
LIEGEFLÄCHE



MIT
NEIGUNGS-
VERSTELLUNG



MIT 5-TEILIGER LIEGEFLÄCHE



C-BOGEN GEEIGNET



LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS



Gute Gründe für eine Säulenliege der Serie 6000E 3

Säulenliegen für Untersuchung, Behandlung



2-teilige Säulenliegen:

- Modell 6000E 6
- Modell 6050E
mit Trendelenburg-Einstellung 8




5-teilige Säulenliegen:

- Modell 6070E 10
- Modell 6075E
mit Trendelenburg-Einstellung 12
- Modell 6080E 14
- Modell 6085E
mit Trendelenburg-Einstellung 16



2-teilige Säulenliegen C-Bogen-geeignet:

- Modell 6100E 18

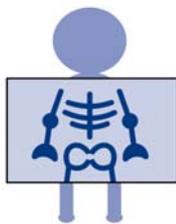

Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln finden Sie auf unserer Internetseite und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!



Elektromotorische Höhenverstellung durch Hubsäule



- Sanfte, ruckelfreie Höhenverstellung durch integrierten, leistungsstarken AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Vollast
- EPR-Sicherheitsnetz kabel mit Zugsicherung, 4 m Länge
- **Integrierte Sicherheitseinrichtung** mit automatischer Verriegelung des Elektromotors nach neuester BfArM-Empfehlung
- Hohe Belastbarkeit



Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit



- Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise: Gute Erreichbarkeit aller Bauteile, keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen
- Optional:
Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu



Serie 6000E - Säulenliegen

Gute Gründe für eine Säulenliege der Serie 6000E




Langlebig ✓




Robust ✓



Pflegeleicht ✓

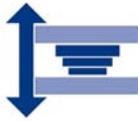

Sanfte Höhenverstellung durch Hubsäule ✓

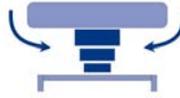

Freiraum unter der Liegefläche ✓



Universeller Einsatz ✓



Bei Modell 6100E zusätzlich:

C-Bogen geeignet ✓

DEWERT

Präzisions-Stahlrohrmöbel




Bewährte Dewert-Qualität

Technik:



- Hubsäule je nach Modell mittig oder einseitig angeordnet, dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche
- **Hohe Stabilität** auch bei außermittiger Belastung der Liege durch spezielles integriertes Führungssystem
- Verkleidung der Hubsäule durch drei ineinander gleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Verwendung von großvolumigem Rechteck-Stahlrohr für Oberrahmen und Untergestell mit Materialwandstärken bis 3 mm
- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Robuste und langlebige Konstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Belastbarkeit modellabhängig

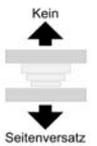

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke: 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz
→ keine brechende Spanplatte bei Randbelastung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75, Ökotex-zertifiziert
→ kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreißt
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
 - Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
 - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Reinigungsset für Skai-Produkte
(Art.-Nr. 050-1000)
Inhalt:

- Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel
- 1 Mikrofaser-Pflegetch 40 x 40 cm

Serie 6000E - Säulenliegen

Gute Gründe für eine Säulenliege der Serie 6000E ...

... mit 2-teiliger oder 5-teiliger Liegefläche:



- Kopfteil stufenlos positiv und negativ verstellbar
- Druckstabile Gasdruckfeder(n) für schwingfreies Arbeiten am Kopf- und Fußbereich



- Bei 5-teiliger Liegefläche **zusätzlich**:
 - Ergonomische Form des Polsters, Verjüngungen vom Mittel-/Rückenteil zum Kopf- und Fußteil
 - Rückenteil stufenlos positiv und negativ verstellbar, durch Verstellung des Rückenteils wird ebenfalls das Kopfteil verstellt, da beide Sektionen miteinander verbunden sind
 - 2-teiliges Fußteil, jedes Beinteil individuell stufenlos verstellbar
 - Verstellung aller Liegeflächensegmente unabhängig von der Liegenhöhe




... mit 2-teiliger oder 5-teiliger Liegefläche und Trendelenburg-Einstellung:

- Elektromotorische Neigungsverstellung der Liegefläche bis 12°, gemessen in waagerechter Positionierung aller Segmente
- Bedienung der elektromotorischen Neigungsverstellung durch einen Handschalter

... mit 2-teiliger Liegefläche, C-Bogen geeignet:

- Kopfteil stufenlos positiv- und negativ verstellbar (optional ohne Kopfteil)
- Einseitig platzierte Hubsäule, Gestellkonstruktion mit hohen Materialstärken zur Aufnahme und Abfederung von Verwindungskräften
- Freifläche im Brust- und Beckenbereich (1.000 mm x 650 mm)

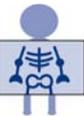

Serie 6000E


2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6000-03E und 6001-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6000-04E und 6001-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6805-..XLE entspricht Modell 6000-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz

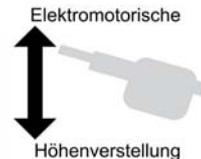

Beide Abb.:
Modell 6000-04XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1048),
Papierrollenhalter (1270K);
Polsterfarbe: 64-717 deep sea



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 6000-..E: 700 mm | Modell 6001-..E: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie 6000E


2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6050-03E und 6051-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6050-04E und 6051-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6810-..XLE entspricht Modell 6050-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz

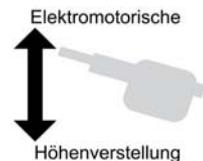

Alle Abb.:
Modell 6050-04XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1048),
Papierrollenhalter (1270K/F);
Polsterfarbe: 64-715 anthracite




Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in Halbrund-Form, verstellbar zu Sitzposition
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 20° (Trendelenburg), Bedienung durch Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -25 bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

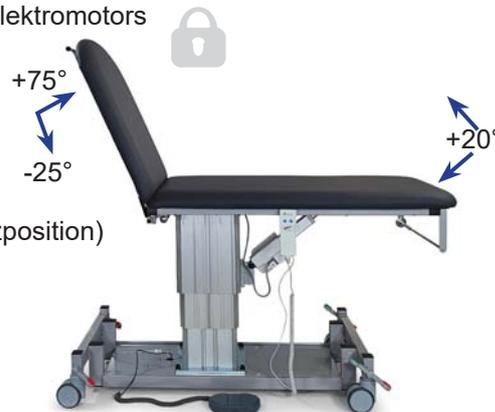

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis 20° (Trendelenburg)
- Breite der Liegefläche: Modell 6050-..E: 700 mm | Modell 6051-..E: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-60
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 820 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Weitere Sicherheitselemente



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Serie 6000E


5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6070-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6070-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6870-..XLE entspricht Modell 6070-..XLE

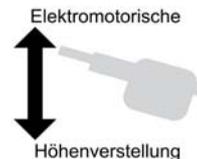

Alle Abb.:
Modell 6070-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt
(1048);
Polsterfarbe 64-715 anthracite



Grundausrüstung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors 
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis $+35^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis $+70^\circ$ verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -50° bis $+50^\circ$ verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 2.040 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Weitere Sicherheitselemente



Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig

Serie 6000E


5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6075-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6075-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6875-..XLE entspricht Modell 6075-..XLE

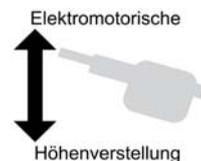

Große Abb.:
Modell 6075-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt (1048);
Polsterfarbe 64-702 white



Grundausrüstung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 12° (Trendelenburg), Bedienung durch Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70° verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -50° bis +50° verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis 12° (Trendelenburg)
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Länge der Liegefläche: 2.040 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Weitere Sicherheitselemente

Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig

Serie 6000E


5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6080-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6080-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6880-..XLE entspricht Modell 6080-..XLE

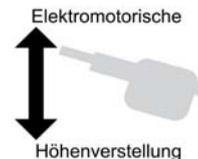

ohne
Abbildung



Grundausrüstung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente, Beinteile nahezu senkrecht abklappbar, dadurch sehr gute Sitzposition
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis $+35^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis $+70^\circ$ verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -85° bis $+20^\circ$ verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Weitere Sicherheitselemente



Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig

Serie 6000E

5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6085-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6085-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6885-..XLE entspricht Modell 6085-..XLE

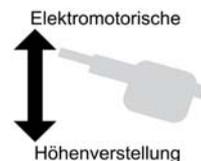


Abb. Modell 6085-04XLE, blau:
mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf
zentral feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt
(1048);
Polsterfarbe 64-174 sky



Abb. Modell 6085-04XLE, grau: mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt (1048),
Fußteil 1-teilig (G101);
Polsterfarbe 64-712
slate grey



Grundausrüstung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Beinteile nahezu senkrecht abklappbar, dadurch sehr gute Sitzposition
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 12° (Trendelenburg), Bedienung durch Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70° verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -85° bis +20° verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis 12° (Trendelenburg)
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Weitere Sicherheitselemente

Art.-Nr. B1997E
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig


Serie 6000E

2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

C-Bogen-geeignet

Modell 6100-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6100-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

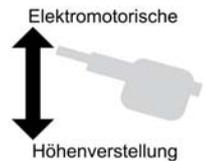

Modell 6100-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter
(1270K/F);
Polsterfarbe 64-154 limone



Liege in oberer Position



Liege in unterer Position

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen, Ø 100 mm
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einseitig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter und einen Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm
- Fußteil fest | Fußteillänge: 1.580 mm
- Liegefläche mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil), Länge 1.040 mm x Breite 690 mm
- Optional verschiedene Abmessungen, einteilige Liegefläche, auch mit HPL-Platte und abnehmbarer Polsterauflage möglich
- Polsterteilstärke: 60 mm



6100-04E mit Ausstattungsoption: Liegefläche 1-teilig (028), Papierrollenhalter (1280K/F)


Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

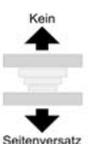

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Polsteroptionen



Art.-Nr. 029
Abnehmbare 1-teilige Polsterauflage auf durchleuchtungsfähiger HPL-Trägerplatte, Polsterauflage und Trägerplatte mit integriertem Nasenschlitz und Füllpolster, im direkten Bereich des Nasenschlitzes eingeschränkte Röntgenfähigkeit
Polsterabmessungen: 1.950 x 730 mm; Röntgenfreifläche: 1.340 x 650 mm



Art.-Nr. 028
Liegefläche 1-teilig, Breite: 730 mm
Röntgenfreifläche: 1.360 x 600 mm

Art.-Nr. 028-10
Liegefläche 1-teilig, Breite: 800 mm
Röntgenfreifläche: 1.360 x 670 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene, 350 mm lang

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene, 1300 mm lang

Seitensicherung




Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm



Besonderheit: C-Bogen geeignet:

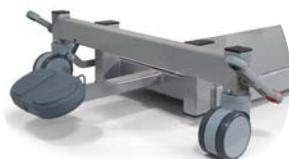

- Verlängerungsarm für den Fußschalter am Kopfende zur einfachen Bedienbarkeit
- Liegefläche: mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil), Länge 1.000 mm x Breite 650 mm



Ansicht von unten



DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel

K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Postfach 14 40 28
33634 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de
E-Mail: info@khdewert.de
YouTube: K.H. Dewert

SÄULENLIEGEN FÜR UNTERSUCHUNG, BEHANDLUNG, THERAPIE

Änderungen der technischen Daten und Irrtümer vorbehalten.

06.2022_01

LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS | SERIE 6000E

