


SEAL STAIN ABLE



NACHHALTIGERES VERPACKEN
IN ZWEI SCHRITTEN

hawo

100%
nachhaltig

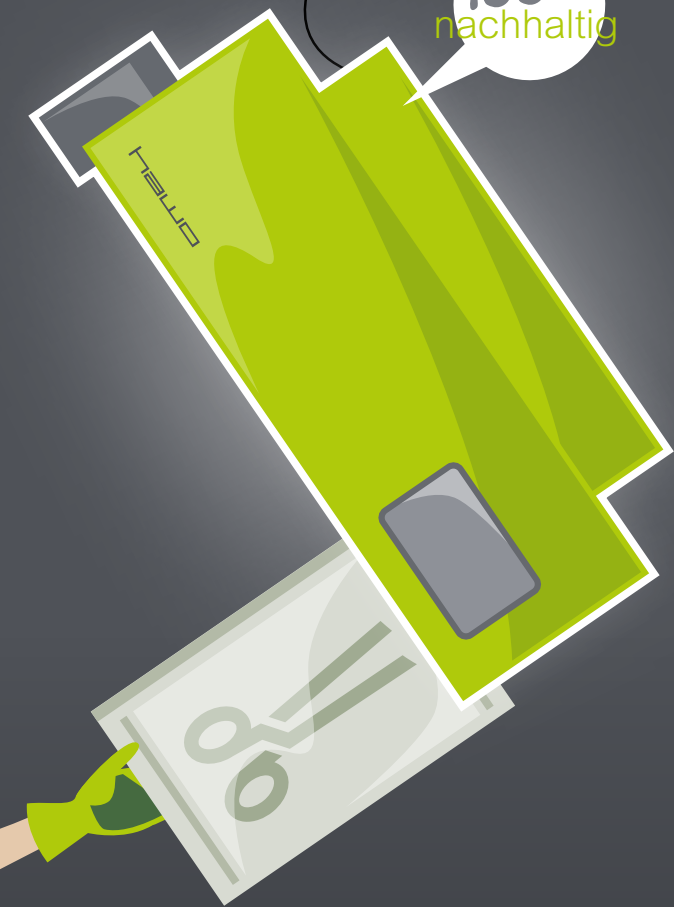

GREENTEK

01

SBS

GREENTEK

Schritt 01 | nachhaltige SBS-Siegelgeräte



GreenTek Siegelgeräte von hawo wie zum Beispiel das hm 950 DC-VI NanoPak sind mit **nachhaltigen und ressourcenschonenden Technologien** ausgestattet. So benötigen diese Geräte nur einen Bruchteil der Energie herkömmlicher Systeme, der CO₂-Fußabdruck ist entsprechend gering.

hawo Siegelgeräte werden selbstverständlich mit selbsterzeugtem Solarstrom produziert und in plastikfreien Transportverpackungen verschickt, ganz im Sinne unseres ConceptZero.



100%
einfach

100%
schützend

100%
plastikfrei

 **ORGANIX**
hawa

02



ORGANIXprotect

Schritt 02 | plastikfreie Schutzverpackung



ORGANIXprotect ist die erste **nachhaltige Schutzverpackung** für Sterilbarriersysteme. Als sogenanntes Dust Cover erfüllt es die normativen Anforderungen an die Schutzverpackung gemäß DIN EN ISO 11607-01 indem es einen physischen Schutz für das SBS und dessen Inhalt bietet.

ORGANIXprotect besteht ausschließlich aus nachhaltigen Rohstoffen und ist **100% plastikfrei, kompostier- und recyclebar.**

SBS



hm 950 DC-VI Nanopak

Eine hochmoderne Heizung bringt NanoPak und weitere Modelle in Rekordzeit auf Betriebstemperatur und arbeitet mit einem höchsteffizienten 24 Volt System, das die Leistungsabnahme auf ein Minimum reduziert.



hd 480 WSI-V ValiPak TOUCH

Die Stand-by-Funktion bzw. Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch gehört bei immer mehr hawo Geräten zum Standard und rundet das GreenTek Konzept gekonnt ab – ganz ohne Kompromisse bei der Qualität der Siegelergebnisse.



Rollenware:

- 200 mm x 400 lfm
- 250 mm x 400 lfm
- 300 mm x 400 lfm

ORGANIXprotect R

Standard Rollenware in verschiedenen Breiten zum individuellen Anpassen an das Sterilbarriersystem. Die Schutzverpackung kann mit Hilfe eines Folien-schweißgerätes passgenau und kostengünstig angefertigt werden.



Selbstklebende Beutel:

- 200 x 300 + 50 mm
- 250 x 400 + 50 mm
- 300 x 500 + 50 mm

Toleranzbereich +/- 2 mm.
Weitere Größen auf Anfrage.

ORGANIXprotect S

Vorgefertigte selbstklebende Beutel in verschiedenen Größen für die noch komfortablere Erstellung einer Schutzverpackung – bestens geeignet für AEMPS mit beengten Platzverhältnissen oder standardisierten SBS-Größen.



Verantwortung

Eine unserer natürlichen Ressourcen.

hawo

hawo GmbH
Obere Au 2-4
74847 Obrigheim
Germany

T +49 (0) 6261/9770-0
F +49 (0) 6261/9770-69

info@hawo.com
www.hawo.com



Wichtige Hinweise:

Unsteril. Nur trockene und abgekühlte Produkte/Sterilgüter verpacken, Gefahr der Kondenswasserbildung.

ORGANIXprotect ist nicht zur Verwendung als innere Schutzverpackung geeignet.

Bitte nur als Schutzverpackung außerhalb des SBS verwenden.

ORGANIXprotect ist nicht als Sicherheitstasche für desinfizierte Medizinprodukte geeignet.